



ООО НТЦ "Петролазер"  
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:  
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:  
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru  
YouTube

Россия, 198099,  
г. Санкт-Петербург,  
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com



## Штатив Крикет М-10

### ЦЕНА

по запросу

Категории:

Общелабораторное оборудование

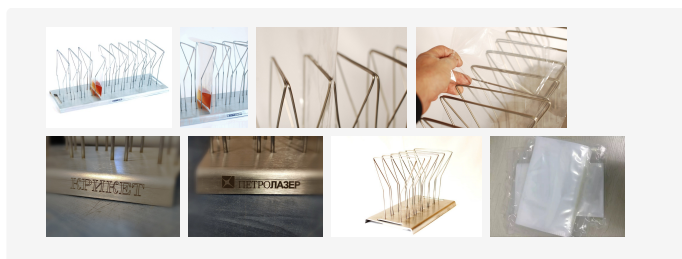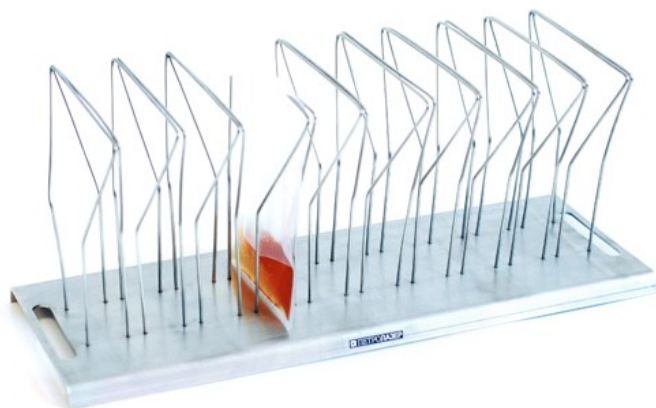

## Описание

Штатив Крикет предназначен для размещения пакетов при работе с лопаточными гомогенизаторами типа Стомахер, Самикс, Мастикатор, и других моделей, использующих стерильные пакеты размерами 190X300 мм. Мы выпускаем две модели : на 6 и на 10 пакетов.

## Назначение

Штатив для размещения пакетов при работе с пробами для гомогенизации, изготовлен из нержавеющей стали. Штатив используется с гомогенизаторами лопаточного типа </sample-preparation-equipment/samix-glp-500/>



ООО НТЦ "Петролазер"  
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:  
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:  
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru  
YouTube

Россия, 198099,  
г. Санкт-Петербург,  
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

## Особенности

Дуги специальной формы, изготовленные из пружинной нержавеющей стали, размещены попарно на массивном основании, и удерживают пакеты в процессе работы с пробой в вертикальном положении, не допуская их проливания. В отличие от штативов аналогичного назначения, использующих пластиковые трубки с разрезом для прижатия пакета к горизонтальной перекладине штатива, наша конструкция позволяет работать с ней одной рукой.

## Характеристики

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>Материал</b>                    | Нержавеющая сталь |
| <b>Размеры размещаемого пакета</b> | до 190 x 300 мм   |
| <b>Количество гнезд</b>            | 10 либо 6 шт.     |