



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com



Штатив Крикет М-10

ЦЕНА

по запросу

Категории:

Общелабораторное оборудование

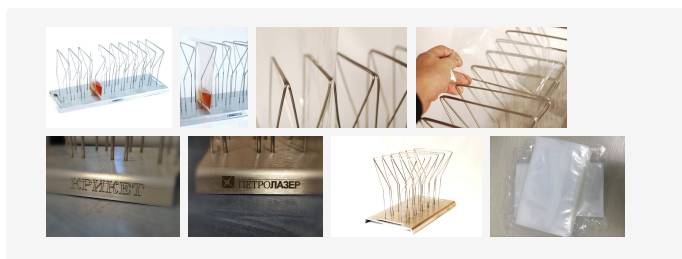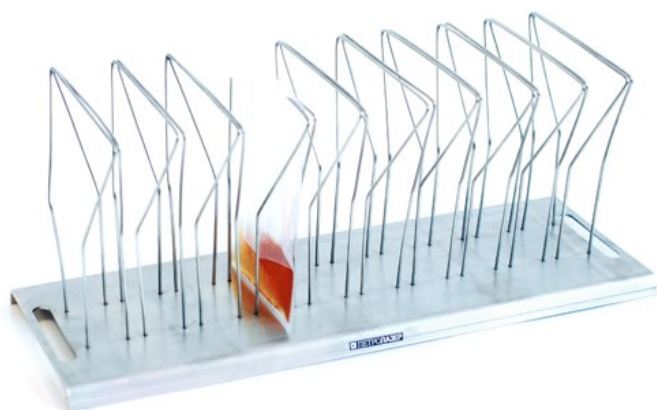

Описание

Штатив Крикет предназначен для размещения пакетов при работе с лопаточными гомогенизаторами типа Стомахер, Самикс, Мастикатор, и других моделей, использующих стерильные пакеты размерами 190X300 мм. Мы выпускаем две модели : на 6 и на 10 пакетов.

Назначение

Штатив для размещения пакетов при работе с пробами для гомогенизации, изготовлен из нержавеющей стали. Штатив используется с гомогенизаторами лопаточного типа </sample-preparation-equipment/samix-glp-500/>



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

Особенности

Дуги специальной формы, изготовленные из пружинной нержавеющей стали, размещены попарно на массивном основании, и удерживают пакеты в процессе работы с пробой в вертикальном положении, не допуская их проливания. В отличие от штативов аналогичного назначения, использующих пластиковые трубки с разрезом для прижатия пакета к горизонтальной перекладине штатива, наша конструкция позволяет работать с ней одной рукой.

Характеристики

Материал	Нержавеющая сталь
Размеры размещаемого пакета	до 190 x 300 мм
Количество гнезд	10 либо 6 шт.