



ООО "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

СИНУС 03 — Термо шейкер; баня со встряхиванием штативов




ЦЕНА

по запросу

Категории:

Бани водяные

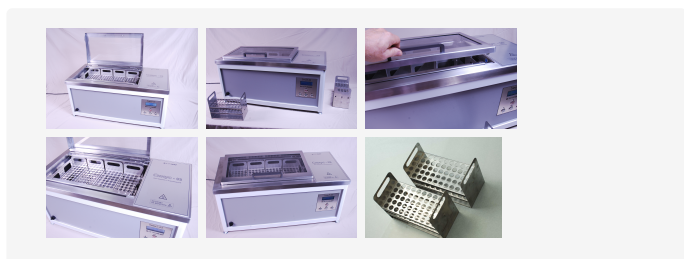

Назначение

Баня со встряхиванием «СИНУС 03» предназначена для подготовки проб посредством термостатированного нагрева в водяной бане на заданное время и встряхиванием (перемешиванием) с заданной частотой (например — при инкубации, гибридизации и т. д.). Компания ПЕТРОЛАЗЕР предлагает купить лабораторную баню по цене производителя.

Особенности

Баня с качающимся ложементом «СИНУС 03» может быть так же использована для размораживания компонентов крови в специальных держателях, а так же на специальную платформу (изготавливается по дополнительному заказу) могут быть установлены колбы, держатели пакетов, или два [штатива Флоринского](#).



ООО "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

- Резервуар бани и внутренние элементы изготовлены из нержавеющей стали;
- Микропроцессорный контроллер с влагозащищенным управлением;
- Дисплей индикации установленных/фактических параметров;
- Встроенный циркуляционный насос, обеспечивающий быстрое и равномерное нагревание по всему рабочему объему ванны;
- Звуковая сигнализация аварий/завершения работы;
- Вывод данных на периферийные устройства по каналу RS-232.
- Прозрачная крышка ванны;
- Датчик отключения при минимальном уровне воды.
- Плавный пуск качания;
- В комплекте поставки штатив для пробирок — 4 шт.

Характеристики

Предел регулирования температуры (°C)	Комн.+5...+99
Погрешность поддержания температуры (°C), не более	±0,5
Неравномерность прогрева в ванной (°C)	±1,0
Время нагрева рабочей жидкости объемом 22 л от температуры +15°C до +40°C (мин), не более	30
Диапазон установки таймера, (мин.)	1 — 999
Теплоноситель	дистиллированная вода
Частота встряхивания, колебаний/мин.	20 — 200
Масса аппарата без жидкости (кг), не более	25
Внутренние размеры ванны, (мм)	535x310x180
Габаритные размеры (мм)	795x400x400
Потребляемая мощность (Вт), не более	2000
Максимальный объем рабочей жидкости (л)	22
Напряжение питающей сети (В)	230±10%
Частота питающей сети (Гц)	50
Вместимость пробирок, штатив/прибор	50 шт./200 шт.

Настройка режимов работы бани «СИНУС 03»