



ООО "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

Миктрон 107 LCD




ЦЕНА

по запросу

Категории:

Микроскопы

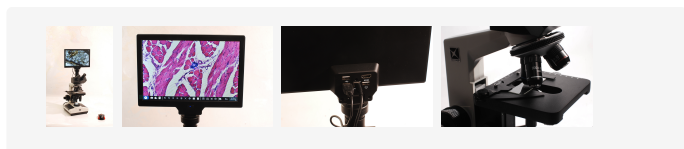

Описание

Микроскопы с экраном

Возможности:



ООО "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

-
- Сохраняются все возможности обычного оптического микроскопа
 - Позволяет работать с препаратами в проходящем и отраженном свете
 - Револьверная головка обеспечивает быстрый просмотр с различным увеличением

Преимущества

- Быстрое изменение коэффициента увеличения за счет цифрового зума
- Групповая работа: помимо наблюдения через окуляры можно смотреть на экран. Данный функционал удобен в групповой работе и при обучении (можно подключать большой экран или проектор по HDMI)
- Работа в режиме телеконференций. Подключение к внешнему компьютеру позволяет работать в группах участники которых могут находиться в разных городах и странах.
- Сравнение изображения различных участков микропрепарата (экран делится на две и в одной из них можно смотреть ранее сохраненные на карте изображения, а на второй изображение с камеры).
- Видеофиксация изображений для последующего анализа и документирования изображений.
- Анализ изображения сразу при просмотре. Встроенное ПО позволяет проводить линейные и угловые измерения изображения (не является средством измерения).
- Удобное меню работы с изображениями

Назначение

Дополняет и расширяет возможности тринокулярных микроскопов.

Применяется в биологии, гистологии, морфологии, цитологии.

Отличное техническое решение для обучения в колледжах и ВУЗах.

Особенности

- Интуитивно понятное меню
- Захват и воспроизведение изображений
- Настройка экспозиции, баланса белого, яркости, контрастности, насыщенности, резкости, гаммы
- Зеркальное отражение изображения по вертикали или горизонтали
- Преобразование изображения в оттенки серого



ООО "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru

YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

-
- Измерение расстояния между двумя точками
 - Измерение ширины, длины, площади прямоугольника
 - Измерение площади круга
 - Угловые измерения
 - Вставка текста на изображение
 - Возможность записи видео

Характеристики

- Размер сенсора 1/2.5"
- Разрешение камеры — Full HD
- Диагональ экрана — 10 дюймов
- Интерфейсы: USB2.0, HDMI
- Питание 12 В / 2А
- Размер ШхГхВ, мм, не более — 260x270x620
- Масса (без адаптера питания), кг, не более — 4.8