



ООО "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

Миктрон 800

ЦЕНА

по запросу




Категории:

Микроскопы

Микроскопы для лабораторий ветклиник

Оборудование для ветеринарных клиник

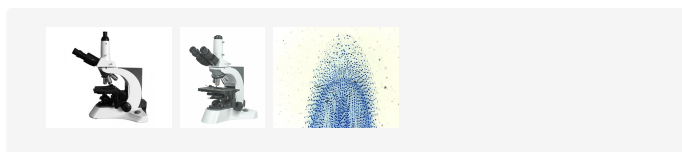

Описание

Микроскоп «МИКТРОН-800» — микроскоп проходящего света, исследовательского класса, с оптической системой «на бесконечность». Позволяет установить окулярную видеокамеру для документирования результатов исследований. Окулярная насадка по схеме Зидентофа. Двухкоординатный предметный столик с износостойким покрытием и коаксиальной регулировкой. Осветитель с конденсором Аббе и ирисовой диафрагмой. Освещение по Келлеру. Возможность работать с масляной иммерсией.

Характеристики

Оптическая система	infinite
--------------------	----------



ООО "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru

YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

Визуализация	бинокулярная (или тринокулярная) насадка с наклоном окуляров 30 град., с регулировкой межзрачкового расстояния 45- 75 мм. и дополнительной насадкой для установки видеоокуляра. (видеоокуляр покупается дополнительно)
Окуляры	сверхширокопольные окуляры 10х/22, диаметр окулярного тубуса 30 мм
Крепление объективов	5-ти гнездовая револьверная головка
Объективы	план-ахромат объективы infinite 4х, 10х, 40х, 100х (масляная имерсия)
Конденсор	центрируемый конденсор, на 0,9/0,25
Фокусировка	коаксиальная грубая и точная
Предметный столик	с двухкоординатным перемещением, 185х142 мм, диапазон перемещения 75х55 мм
Осветитель	встроенный, по Келлеру, галогеновая лампа 12в/30вт с регулировкой яркости
Габаритные размеры (ШхГхВ)	280х358х418 мм