



ООО "Петролазер"  
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:  
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:  
8-800-600-53-99


Email: laser@petrolaser.ru  
YouTube

Россия, 198099,  
г. Санкт-Петербург,  
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

## Анаэростат МИКТРОН АК-3

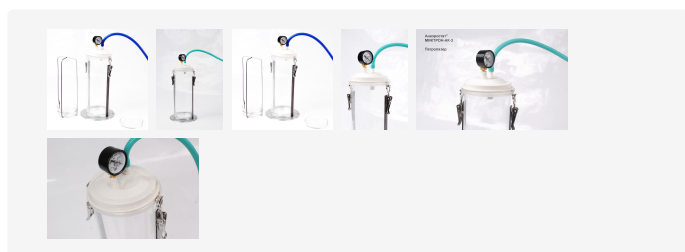

### ЦЕНА

по запросу

Категории:

Оборудование для пробоподготовки

### Описание

Анаэростат предназначен для культивирования анаэробов (*bacteroides*) и микроаэрофилов (*campylobacters*) в условиях среды с измененным газовым составом.

### Назначение

Культивирование анаэробов, в модифицированной газовой среде — в 10 чашках Петри диаметром 90 мм одновременно.

Рекомендуется использовать: Газогенерирующие пакеты типа Газпак либо вакуум -



ООО "Петролазер"  
[www.petrolaser.ru](http://www.petrolaser.ru)

Многоканальный телефон:  
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:  
8-800-600-53-99

Email: [laser@petrolaser.ru](mailto:laser@petrolaser.ru)  
YouTube

Россия, 198099,  
г. Санкт-Петербург,  
Промышленная, д. 42



[www.petrolaser.com](http://www.petrolaser.com)

---

заместительное заполнение бескислородными газовыми смесями.

## Особенности

Стеклянный корпус прибора позволяет наблюдать за стадией роста колоний анаэробных бактерий;

Удобный штатив на 10 чашек Петри;

Герметичная крышка с вакууметром \ манометром и сменной силиконовой прокладкой;

Щтуцер 8 мм на крышке под вакуумный шланг;

Подставка из пластика под корпус;

Регулируемые зажимы «патефонного» типа;

Возможность поставки с вакуумной станцией (по отдельном заказу).

## Характеристики

Минимальное разряжение 0.005 от атмосферного

Вместимость анаэростата 10 чашек Петри

Размер чашек Петри 90 мм

Штатив вместимостью 10 чашек

Избыточное давление от 0.05 до 1.5 bar

Объем емкости сосуда анаэростата 3 л