



ООО "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com


Вакуумная станция ANTLIA BH-075M

ЦЕНА

по запросу

Категории:

Оборудование для пробоподготовки

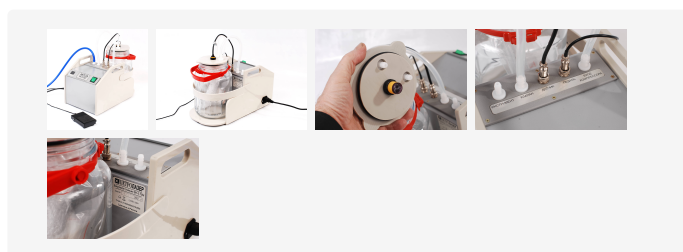

Описание

Назначение

Вакуумная станция ANTLIA BH-075M предназначен для контролируемой аспирации (удаления) и утилизации различных биологических жидкостей во время лабораторных работ (например, при очистке ДНК/РНК и других технологий переосаждения макромолекул); для рутинных операций отмывки клеток от питательной среды и ресуспендирования в буфере; для удаления дисков агара при подготовке к



ООО "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

проведению реакции преципитации и других работ.

Вакуумная станция ANTLIA BH-075M соответствует требованиям:

Приказ МЗ РФ №464н от 18 мая 2021; Приложение №8: Стандарт оснащения микробиологической лаборатории

ГОСТ Р 53434-2009 Принципы надлежащей лабораторной практики.

ГОСТ 34105-2017 Животные. Лабораторная диагностика бруцеллеза. Серологические методы.

Особенности

Вакуумная станция комплектуется емкостью для отходов на 3 литра, снабжен датчиком от переполнения и микропроцессорным контролем уровня вакуума.

На фронтальной панели расположен основной блок управления с цифровым индикатором уровня вакуума и возможностью дополнительной настройки параметров всасывания.

Специальная ручка-манипулятор со съёмными наконечниками соединена с основным блоком специальной медицинской силиконовой трубкой и может быть легко разобрана для очистки и дезинфекции.

Кнопка контроля вакуума расположена на ручке-манипуляторе аспиратора.

Дисковый антибактериальный фильтр на выходе воздуха предотвращает загрязнение воздуха лаборатории.

Характеристики

Остаточное давление	от 25 кПа до 50 кПа
Скорость аспирации (вода 20С)	$\geq 1,5$ л / мин
Уровень шума	≤ 65 дБ (А)
Электропитание	переменный ток, 230 В \pm 10% / 50 Гц



ООО "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

Потребляемая мощность	90 ВА
Вес	4,4 кг
Емкость	Стекло, 3000 мл
Габаритные размеры, мм ШхГхВ	215x380x370