



ООО "Петролазер"  
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:  
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:  
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru  
YouTube

Россия, 198099,  
г. Санкт-Петербург,  
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

# Гомогенизатор лабораторный ГЛ-П-300 10000



## ЦЕНА

по запросу

### Категории:


Оборудование для пробоподготовки

Гомогенизаторы лабораторные

Лабораторное оборудование пробоподготовки  
для ветеринарных клиник

Оборудование для ветеринарных клиник

Оборудование для пробоподготовки

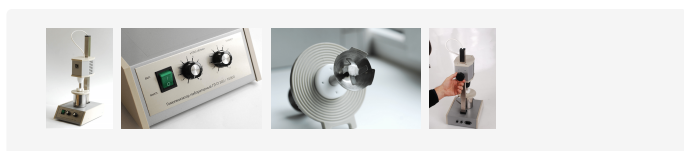

## Описание

**Гомогенизатор лабораторный ГЛ-П 300/10000** — предназначен для получения



ООО "Петролазер"  
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:  
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:  
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru  
YouTube

Россия, 198099,  
г. Санкт-Петербург,  
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

однородных, мелко измельченных смесей, а также эмульсий с высокой дисперсностью в процессе пробоподготовки перед проведением лабораторных исследований. Чтобы купить гомогенизатор лабораторный ГЛ-П-300 10000 оставьте заявку на сайте или обратитесь к онлайн-консультанту. Предлагаем также ознакомиться с обзором [гомогенизаторов ГЛП](#).

## Назначение

Эмульсификация смесей жиров, гомогенизация растворов и смесей жидкостей в целях получения репрезентативного образца.

## Особенности

**Гомогенизатор лабораторный ГЛ-П-300 10 000** отвечает требованиям ГОСТов: — **ГОСТ 31976-2012**. Йогурты и продукты йогуртные. Потенциометрический метод определения титруемой кислотности — **ГОСТ 33926-2016**. Продукты молочные составные и молочносодержащие. Мороженое и смеси для мороженого. Определение массовой доли жира методом Вейбулла-Бернтропа.

Рабочий орган — ротор, может быть снабжен ножом с двумя или четырьмя областями. Нож изготовлен с такой геометрией, которая обеспечивает вихреобразование и подачу материала в зону измельчения.

Наличие полипропиленовой крышки с канавками препятствует разбрызгиванию образца, и позволяет работать с емкостями различного объема.

П-образный выступ на крышке ориентирует ее относительно стойки аппарата.

## Характеристики

<b>Максимальная скорость вращения</b>	10 000 об/мин
<b>Мощность двигателя не менее</b>	400Вт



ООО "Петролазер"  
[www.petrolaser.ru](http://www.petrolaser.ru)

Многоканальный телефон:  
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:  
8-800-600-53-99

Email: [laser@petrolaser.ru](mailto:laser@petrolaser.ru)  
YouTube

Россия, 198099,  
г. Санкт-Петербург,  
Промышленная, д. 42



[www.petrolaser.com](http://www.petrolaser.com)

<b>Диапазон установки таймера</b>	1 — 10 мин (с шагом 1 мин)
<b>Рабочая емкость</b>	нержавеющая сталь
<b>Максимальный объем гомогенизируемого образца</b>	до 1 л *
<b>Электропитание</b>	220В/50Гц
<b>Габаритные размеры</b>	580x290x220 мм
<b>Масса</b>	7,5 кг

\* В базовой комплектации прибор оснащен тремя емкостями на 0.25 л., 0.5 л и 1л. По дополнительной заявке прибор может быть укомплектован и другими емкостями до 1.0 л.