



ООО "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99


Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

СХВ-П Стол операционный по Виноградову

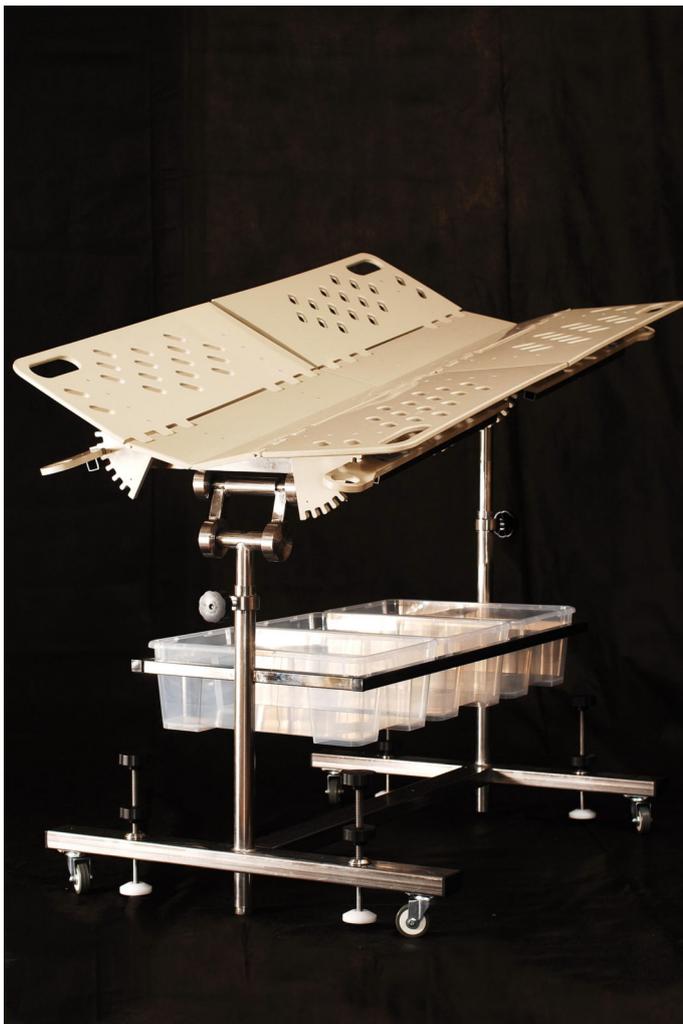

ЦЕНА


по запросу

Категории:

Столыв ветеринарные

Хирургическое оборудование для
ветеринарных клиник

Оборудование для ветеринарных клиник

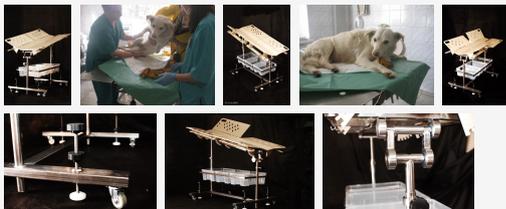



ООО "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com



Описание

Стол хирургический ветеринарный «СХВ-П» — для размещения и фиксации мелких домашних, сельскохозяйственных и диких животных (кошек, собак, овец, коз и т.д.) весом до 80 кг при проведении хирургических операций, перевязок и других манипуляций, требующих ограничения подвижности животного. Чтобы купить ветеринарный стол Виноградова оставьте заявку на сайте или обратитесь к онлайн-консультанту.

Назначение

Стол может использоваться в условиях ветеринарных станций, клиник и лечебниц, ветеринарных служб звероводческих и животноводческих хозяйств, зоопарков, цирков и т.п.

Особенности

Станина стола выполнена в виде жесткой сварной двухопорной конструкции. Для перемещения стола по помещению операционной предусмотрены две роликовые опоры, а для надежной фиксации в рабочем положении, в том числе и на неровной поверхности, используется четыре винтовых упора.

Рабочая поверхность стола состоит из неподвижной центральной части и четырех подвижных секций с отверстиями для фиксации конечностей. Каждая секция регулируется отдельно, угол фиксируется с помощью специальных направляющих.

Столешница стола выполнена из прочного полипропилена. Полипропилен отличается высокой стойкостью к истиранию, высоким температурам, химическим реагентам, почти не подвергается коррозионному растрескиванию. Поверхность легко моется, что облегчает уборку и дезинфекцию.

Столешница установлена на станине с помощью двух телескопических стоек,



ООО "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

позволяющих в широком диапазоне варьировать высоту стола и угол наклона стола в продольном направлении. Основание (шасси стола) выполнено из нержавеющей стали, и имеет три емкости для сбора биологических отходов.

Характеристики

Габаритные размеры стола в сборе, мм	1160x690x725
Размеры рабочего поля, мм	1160x690
Диапазон регулировки высоты, мм	725 - 1300
Диапазон регулировки продольного угла наклона	±20 град.
Масса стола без упаковки, кг, не более	46
Максимальная нагрузка на столешницу, кг, не более	80