



ООО "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

СВС-1 Стол ветеринарный хирургический



ЦЕНА


по запросу

Категории:

Стол ветеринарные

Хирургическое оборудование для
ветеринарных клиник

Оборудование для ветеринарных клиник

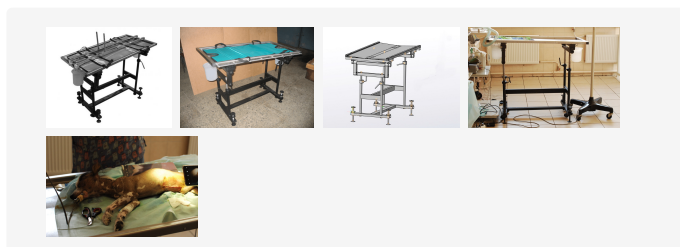

Описание

Стол ветеринарный хирургический «СВС-1» — это хирургический ветеринарный стол 4-го поколения, воплотивший в себе лучшие технические решения отечественных и иностранных аналогов, отобранных с учетом мнений более 50 практикующих врачей.

Специально разработанный для нужд ветеринарии, с большим количеством дополнительных аксессуаров. Чтобы купить стол ветеринарный СВС-1 оставьте заявку на сайте или обратитесь к онлайн-консультанту.



ООО "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

Особенности

Четыре телескопические стойки на мощной сварной раме обеспечивают регулировку высоты и угла наклона стола, а рациональная развесовка составных частей гарантирует хорошую устойчивость. Широкий диапазон регулировок положения продольных штанг для фиксации тела оперируемого животного позволяет надежно зафиксировать тело и конечности животных любых размеров в любых положениях: лежа на животе, на спине, на боку, стоя и т.д. Водонепроницаемый матрас-носилки предотвращает контакт тела животного с металлической поверхностью столешницы во время операции и позволяет легко перенести его после операции к месту дальнейшего содержания. В комплект поставки входят:

- Теплоизолирующий матрас носилки
- Роликовые опоры и регулировочные фиксаторы основания
- Подвесные емкости для сбора биологических жидкостей

Характеристики

Размеры рабочего поля, мм	1180x560
Диапазон регулировки высоты, мм	750 – 1100
Диапазон регулировки продольного угла наклона, град	+20
Габаритные размеры стола в сборе, мм	1240x620x1500
Вес, кг	70