



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com


Кювета для просмотра осадка

ЦЕНА

по запросу

Категории:

Аксессуары оборудования на трихинеллез

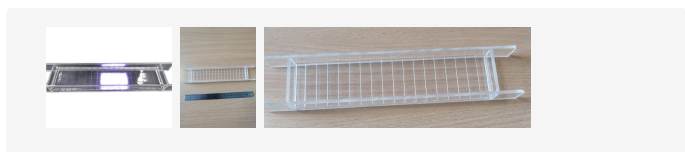

Описание

Кювета для обнаружения и подсчета личинок трихинелл

Назначение

Контроль пробы, полученной методом переваривания в искусственном желудочном соке.

Особенности

Соответствует требованиям Директивы ЕС 2075\2005 для метода магнитной мешалки. Может использоваться при просмотре пробы в проходящем свете как на микроскопах и трихинеллоскопах инвертированной схемы, так и прямой (объектив сверху,



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

осветитель — снизу).

Характеристики

Размеры	230 x 45 x 20 мм
Дно кюветы	приподнято на 4 мм и разделено на квадраты 10x10 мм
Всего	72 квадрата