



ООО НТЦ "Петролазер"  
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:  
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:  
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru  
YouTube

Россия, 198099,  
г. Санкт-Петербург,  
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com



## Компрессорий МИС-7П

### ЦЕНА

по запросу

Категории:

Аксессуары оборудования на трихинеллез

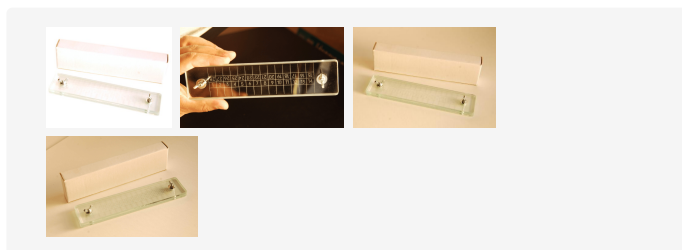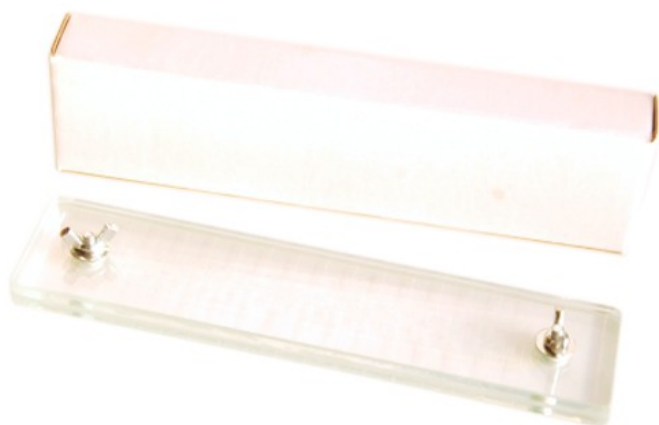

## Описание

**Компрессорий МИС-7П** — предназначен для расплющивания образцов мяса при исследовании его проб на наличие трихинелл компрессорным методом с помощью трихинеллоскопа. В пронумерованные прямоугольники размещаются исследуемые пробы мяса. Для расплющивания мяса, которое исследуется, прижимается верхняя пластина при помощи барашковых гаек. Очень удобен в использовании на комбинатах, выездных экспертизах и так далее. Возможно использование вместе с трихинеллоскопами, а также с некоторыми видами лабораторных микроскопов. Проведение анализа мяса на наличие паразитарных форм организмов имеет огромное значение, так как они (трихинеллы, гельминты и т.д.) могут нанести существенный ущерб здоровью человека.

**Компрессорий МИС-7П поставляется в комплекте:**



ООО НТЦ "Петролазер"  
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:  
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:  
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru  
YouTube

Россия, 198099,  
г. Санкт-Петербург,  
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

- [Стейк-О](#) — 1 шт.
- Стейк-М — 2 шт.
- [Стейк](#) — 2 шт.
- [Стейк 2](#) — 2 шт.
- Стейк V вар. 3 — 2 шт.
- [Стейк-Про](#) — 2 шт.

## Характеристики

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Габаритные размеры,<br/>мм</b>   | 220*50*26 |
| <b>Размер ячейки, мм</b>  | 13*11     |
| <b>Толщина каждой<br/>пластины, мм</b>  | 6         |
| <b>Наибольшее<br/>количество проб,<br/>помещаемое в<br/>компрессорий, шт.</b> | 28        |
| <b>Масса, кг не более</b>   | 0,350     |