



ООО "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com


Компрессорий МИС-7П

ЦЕНА

по запросу

Категории:

Аксессуары оборудования на трихинеллез

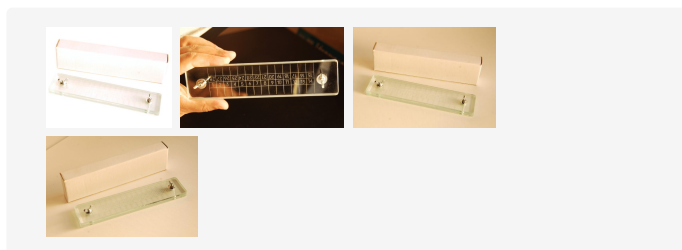

Описание

Компрессорий МИС-7П — предназначен для расплющивания образцов мяса при исследовании его проб на наличие трихинелл компрессорным методом с помощью трихинеллоскопа. В пронумерованные прямоугольники размещаются исследуемые пробы мяса. Для расплющивания мяса, которое исследуется, прижимается верхняя пластина при помощи барашковых гаек. Очень удобен в использовании на комбинатах, выездных экспертизах и так далее. Возможно использование вместе с трихинеллоскопами, а также с некоторыми видами лабораторных микроскопов. Проведение анализа мяса на наличие паразитарных форм организмов имеет огромное значение, так как они (трихинеллы, гельминты и т.д.) могут нанести существенный ущерб здоровью человека.

Компрессорий МИС-7П поставляется в комплекте:



ООО "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

- [Стейк-О](#) — 1 шт.
- Стейк-М — 2 шт.
- [Стейк](#) — 2 шт.
- [Стейк 2](#) — 2 шт.
- Стейк V вар. 3 — 2 шт.
- [Стейк-Про](#) — 2 шт.

Характеристики

Габаритные размеры, мм	220*50*26
Размер ячейки, мм	13*11
Толщина каждой пластины, мм	6
Наибольшее количество проб, помещаемое в компрессорий, шт.	28
Масса, кг не более	0,350