



ООО "Петролазер"  
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:  
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:  
8-800-600-53-99


Email: laser@petrolaser.ru  
YouTube

Россия, 198099,  
г. Санкт-Петербург,  
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

## Стейк D2

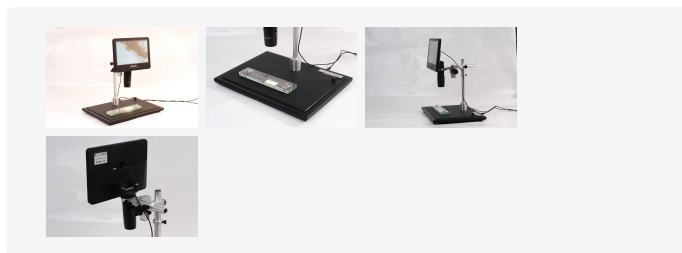

### ЦЕНА

по запросу

#### Категории:

Оборудование для исследования на  
трихинеллез  
Паразитология  
Трихинеллоскопы

## Описание

Цифровой трихинеллоскоп на основе планшетного компьютера, заблокированного с камерой разрешения UHD.

## Назначение

СТЕЙК-D2 реализует компрессорный метод контроля образцов мяса, также на нем можно проводить исследование надосадочной жидкости при исследовании методом переваривания в искусственном желудочном соке.



ООО "Петролазер"  
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:  
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:  
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru  
YouTube

Россия, 198099,  
г. Санкт-Петербург,  
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

## Особенности

Используется цифровая камера высокого разрешения, и ЖК монитор, позволяющие получить четкое, контрастное изображение. Это позволяет рассматривать на экране как всю ячейку целиком, так и подробности структуры микропрепарата.

Светодиодный матричный осветитель обеспечивает белый равномерно рассеянный свет просвечивающий размещённый в компрессории образец. Изображение через объектив поступает на матрицу камеры и выводится на ЖК-экран планшетного компьютера для визуального контроля.

Так же в планшетный компьютер может подключаться microSD карта для сохранения фото и видео изображений.

## Характеристики

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>Минимальный коэффициент увеличения, не более</b>                | 12                           |
| <b>Максимальный коэффициент увеличения, не менее</b>               | 105 (с цифровым увеличением) |
| <b>Размер экрана (диагональ), мм</b>                               | 254                          |
| <b>Формат видео</b>  | MP4                          |
| <b>Разрешение видеокамеры</b>                                      | 2880 x 2160                  |
| <b>Возможность цифрового увеличения</b>                            | Да                           |
| <b>Максимальная просматриваемая высота прозрачного объекта, мм</b> | 80                           |



ООО "Петролазер"  
[www.petrolaser.ru](http://www.petrolaser.ru)

Многоканальный телефон:  
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:  
8-800-600-53-99

Email: [laser@petrolaser.ru](mailto:laser@petrolaser.ru)  
YouTube

Россия, 198099,  
г. Санкт-Петербург,  
Промышленная, д. 42



[www.petrolaser.com](http://www.petrolaser.com)

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Возможность записи изображения на microSD карту</b> | Да          |
| <b>Регулировка яркости освещения</b>                   | Да          |
| <b>Электропитание</b>                                  | 220В/50 Гц  |
| <b>Энергопотребление, не более, Вт</b>                 | 50          |
| <b>Габаритные размеры, мм</b>                          | 300x400x500 |
| <b>Масса, не более, кг</b>                             | 5           |